

使用後の管理

本フェイスシールドを繰り返し使用する際は、感染予防の規定に沿い、必要に応じて感染の専門家等に相談し使用・管理の検討を行ってください。

① 洗浄・消毒などによる耐久性

「シールドフレーム」は、**次亜塩素酸ナトリウム（ハイター・ピューラックス等）での消毒、石鹼を用いた洗浄**が可能です。繰り返しの消毒や使用によって変色・劣化が発生します。3D プリント製であるシールドフレームは、浸けでの消毒が推奨されます。熱水での機械洗浄、オートクレーブは使用できません。

「シールド」は、**エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭での消毒**が可能です。

「シールド用止め具」は、**次亜塩素酸ナトリウムでの消毒（30 分浸漬）、石鹼を用いた洗浄**が可能です。

「バンド」は劣化の可能性もありますので毎回取り替えて使用することを推奨します。

② パーツの交換

「バンド」の劣化、紛失などの場合は、雑貨店やインターネットサイト等で販売されている同様の商品を使用することができます。大きめの輪ゴムやゴム紐でも代用可能です。

使用材料について

- ・フレーム部 : (3D プリント製) ポリプロピレン (リサイクルプラスチック)
- ・シールド : ポリカーボネート
- ・ゴムバンド : ポリウレタン
- ・シールド止め具 : ポリプロピレン

お問い合わせ

使用に際しての不明点などありましたら、下記へ連絡をお願いします。

エス.ラボ 株式会社 <http://slab.jp/>

〒612-8371 京都府京都市伏見区竹田松林町 7 4

TEL : 075-634-9577 担当 : 脇本(取扱いについて)・橘 (その他のお問い合わせ)



P&G 社 プレスリリース シールドカット 型紙



S lab Web



Fab Safe Hub



取扱説明書 ver.2.0.0
最終更新日 : 2020.6.20
Supported by: FabSafeHub


“Wakyu”モデル 取り扱い・組み立て説明書

使用上の注意

- ・ フェイスシールドの下部、および開口部から飛沫の侵入は防ぐことはできないため、眼部、鼻腔、口腔粘膜への付着や顔面への付着による曝露を減少させる事を目的としますが、完全に防ぐことはできません。
- ・ 本取扱説明書に記載されていない使い方をしないで下さい。
- ・ シールドを付けたままの運動・激しい動きなどによるケガなどに対し一切の責任を負いません。
- ・ 高温環境下での使用、高温になる光源の近くでは使用しないでください。
- ・ 破損した場合は、即時使用を中止して下さい。破損部は鋭利なため、怪我をする可能性があります。


本フェイスシールドの構成部品

- 「1. シールドフレーム」、「2.シールド」、「3.シールド止め具」、「4.バンド」の4パーツで構成されています。
シールドフレームは3D プリンタにて造形、シールドは止め具を付ける為に穴が開いています。
S・Mの2サイズがあります ※ 付属品・色は予告なく変更する場合があります。

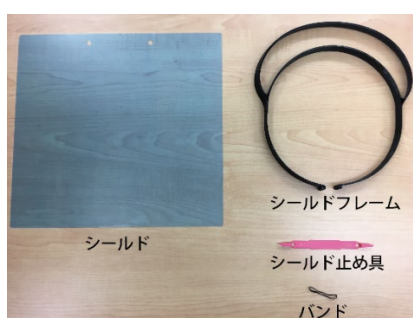

組み立て方



1. 「シールド」の両面についている青と透明の保護フィルムを必ずはがして下さい。

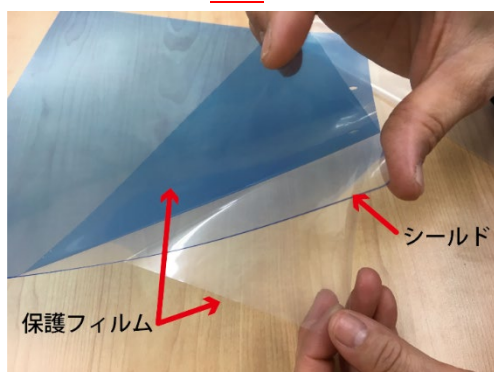


保護フィルムがはがしにくい場合は、テープなどを使用して下さい。

2. 「シールドフレーム」の向きを確認

3D プリントされたシールドフレームは右下の写真のように角度がついています。そり上がっている方が上側(頭側)になります。

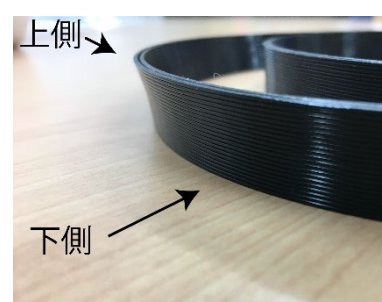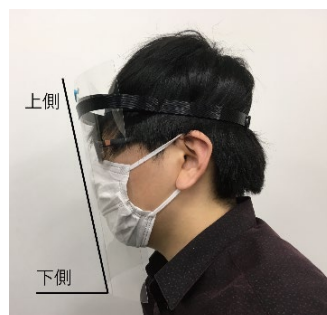

3. 「シールドフレーム」に隙間を作る

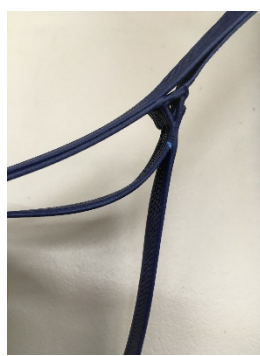

シールドフレームの**下面を手前**に持ち、
指を使って、押し広げる
(写真を参考)



スリットがくっついている場合があります。
根本まで開いて下さい。

強く引っ張りすぎると裂けてしまいます。

4. 「シールド」を「フレームに差し込む」

穴が開いている面を上にして押し広げた部分にはめこむ。

※ 分かり易くする為、画像では保護フィルムがついています。

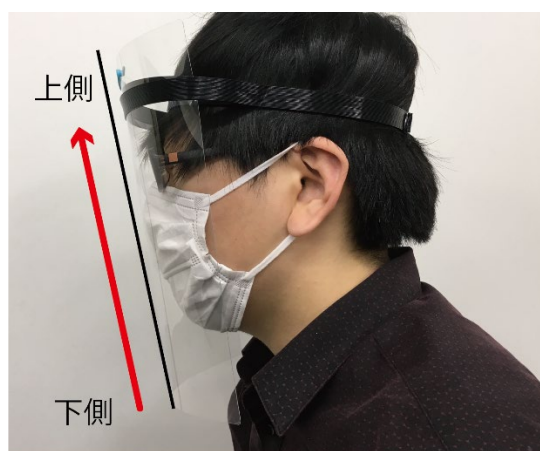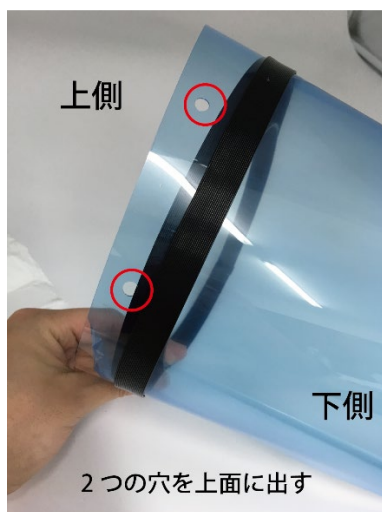

シールドを入れる方向。下から上に向かって差し込む

5. 「シールド」の穴が開いている部分に止め具を差し込む。

一般的な穴あけパンチでシールド止め具の穴を作る事が可能です。

※ 分かり易くする為、画像では保護フィルムがついています。



6.ゴムバンドを付ける。

付属している、ゴムバンドを画像のように取り付ける。サイズに合わせて調整下さい。



使用前の確認事項

組み立て品の確認

組み立てたフェイスシールドが正しい状態か確認して下さい。



(フレームの向きが上下逆です)



シールドが顔のサイズに適しているか確認して下さい。

使用前の Q&A

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ・ Q1: シールドがフレームに入らない | A1: 手で少し開いてください |
| ・ Q2: フレームに青白い部分がある | A2: 力がかかり白くなっているだけです。問題ありません |
| ・ Q3: シールドが大きく使いにくい | A3: 下記 URL にある型紙を印刷し、カットしてお使いください |

① 使用前の消毒

梱包・発送時は衛生面に十分配慮しておりますが、**使用前に必ず「シールドフレーム」「シールド」「シールド止め具」すべてのパーツに対し消毒作業**をお願いします。

② 装着時の使用感の確認

「シールドフレーム」は、細い部分や層部のひび割れ・破損がないか確認をしてください。ハサミなどでカットをして長さを調整する際は、ケガなどに十分注意してください。「バンド」の長さ調整を行い、**額から外れず保持できるか確認**してください。装着が不十分な場合は、外れる恐れがあります。